

Pinari

Miraclip

美しさに、
もう一段上の自信を。

新発想 高周波リフティング

自宅で始める、
上質なフェイスクア習慣。



温もりを感じるケア



フェイスラインを
意識したお手入れ



洗練されたデザイン

大人の肌に、毎日のご褒美を。



詳しくはお問い合わせください



エリクセンス株式会社

Miraclip

美しさは、自宅で進化する。

この世になかった、新しい高周波リフティング

ミラクリップ チプティング Miraclip Chiputing

いよいよ、日本デビュー！

美容大国・韓国から誕生した、新発想の家庭用美容機器「ミラクリップ チプティング」。

韓国最大手テレビショッピング

「GS SHOP」では、発売と同時に連続完売を記録！

多くの女性から注目を集めた美容機器が、ついに日本へ上陸します。

プロの美容技術に着想を得た、新発想。

01 | インモード発想の家庭用美容機器

プロの美容施術に着想を得た設計で、
本格的なフェイスクアを自宅で手軽に。

02 | 独自のクリップ形状

気になる部分を挟み込むようにケアできる、
ミラクリップ独自のチプティング方式。

03 | ジェル・消耗品不要

ジェルを塗る手間も、消耗品を購入する必要もありません。
使いたいときに、すぐ始められます。

面倒ゼロ！

使い方簡単！

だから、毎日続けられる。

忙しい毎日でも、無理なく続けられる美容習慣。

エステに通う時間がない。

複雑なお手入れは続かない。

もっと手軽に、本格的なケアを始めたい。

そんな大人の女性のために生まれた、

新しいホームビューティーという選択です。

大人の肌に、毎日のご褒美を。

Miraclip ミラクリップ

Elixence 会員様 特別価格！

¥45,000(税別) ポイントなし

詳しくはお問い合わせください。


Elixence 株式会社

TIMELESS
**BEAUTY
SOLUTION.**



ピナリ ミラクリップの使用方法

ピナリ ミラクリップ各部名称

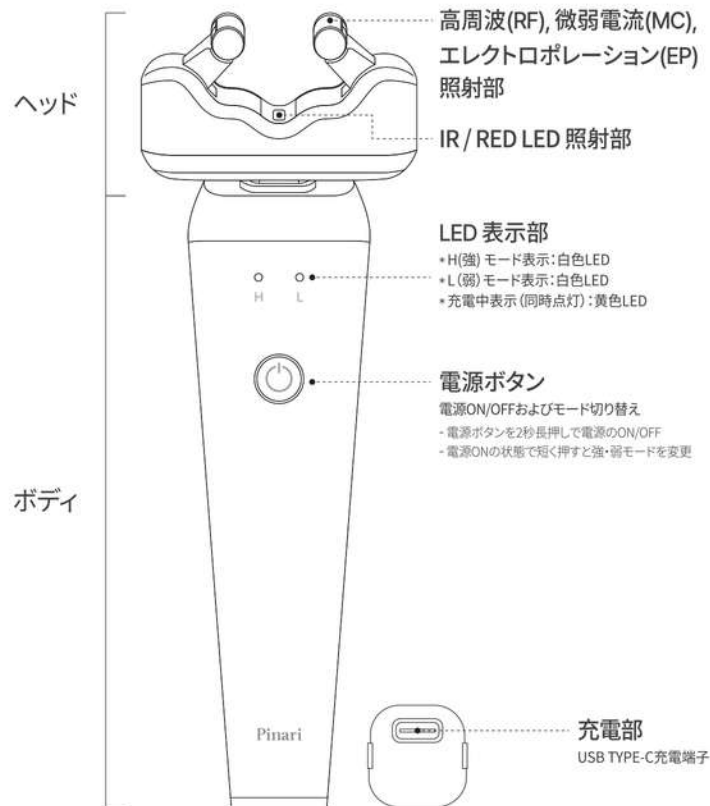

ピナリ ミラクリップの設定方法

01.電源を入れる

デバイス前面にある電源ボタンを2秒間長押ししてください。
(電源が入ると、デバイスのHモードランプが点灯します。)

02.モードの選択方法

電源を入れると自動的に「H」モードに設定されます。

「L」モードに切り替える場合は、電源ボタンを短く押して変更してください。

モードを変更すると、ブザー音とともに電源ボタン上部のLEDディスプレイに表示されます。

※Hモードは25秒間、Lモードは20秒間動作します。※2分間操作がない場合は、自動的に電源がオフになります。

03.バッテリー残量と充電確認方法

下部のType-C USB充電ポートに、同梱のUSBケーブルを接続して充電してください。

-充電が必要な場合 (15%以下): YELLOW LEDとGREEN LEDが点滅した後、自動的に電源がOFFになります。

-充電中: YELLOW LEDが点灯します。充電中は動作しません。

-フル充電時: YELLOW LEDが消灯します。(急速充電の場合 約2時間 / 低速充電の場合 約4~5時間)

-その他: 電源が入った状態で2分間操作がない場合、バッテリー消耗を防ぐため自動的に電源がOFFになります。

使用前の注意事項

目の周り、鼻、口、甲状腺周辺は
使用を避けてください。

治療中の部位や施術部位への使用は控え、
取扱説明書に記載された禁止部位のスキンケアに関して、
副作用についてはメーカーは責任を負いません。



ピナリ ミラクリップの使い方



- 01 本体の電源ボタンを
2秒間長押ししてデバイスを起動します。



- 02 電源ボタンを短く押して、[強/弱]モードを
設定します。(初期設定：強)
※強モードは25秒間、弱モードは20秒間動作します。



- 03 機器を希望の部位に当てて、
開始音と同時にケアを始めます。



- 04 ケアを行う際は、肌にしっかりと
機器をぴったり密着させてください。
※機器を動かさず、そのまま保持してください。



- 05 終了音が鳴ったら、次の部位に移動して
同様に繰り返してください。
※強い熱さを感じたら、まず弱モードから始めてください。

ピナリ ミラクリップ パッケージ & デザイン



誰もが満足する INMODE(インモード)ブーム!

ID病院(IDびょういん)によると、昨年、ID皮膚科に来院した男性顧客の割合は、30代が32.7%で1位となり、次いで20代が31.4%、40代が19.8%、50代が7.5%、60代が3.7%という結果になりました。

同時期の女性は、30代が30.7%、40代が26.8%、20代が17.7%の順となっており、20代と30代の割合はいずれも男性の方が高い結果を示しました。

男性来院顧客の割合において、20代と30代が全体の64%を超えたのは今回が初めてです。これは、若い男性が美容施術に関心を持ち始めたことで、訪問率が高まったものとみられます。

実際に、昨年の男性施術ベースでは、ウルセラ(リフティング)が2020年比で7.1%増加、サーマクール(しわ・たるみ治療)が89%増加、インモード(コラーゲン再生)が23%増加と、**プチ美容施術の成長が顕著でした。**

パク院長は、代表的な施術として「インモード」を挙げました。彼は、「これはアンチエイジングレーザー施術として知られていますが、肌の弾力を高めるだけでなく、過剰な頬の脂肪と顎の脂肪を破壊し、顔の輪郭を滑らかに改善します」と説明しました。

INMODE(インモード)とSHURINK(シュリンク)を用いた肌の弾力改善

최민석 기자 / 기사승인 : 2024-05-09 11:31:24

f t i p N b

シャープなVラインと滑らかで弾力のある顔は、若年層をはじめ多くの人にとって美の基準となっています。シャープなVラインの顔は、洗練されたイメージを与えるだけでなく、若々しくも見えます。しかし、加齢に伴って頬のたるみや二重あごができるなど、顔の輪郭が変化して悩むケースが多く見られます。


年間キーワード	月間検索数	
	PC	MO
インモード	6,980	34,400
インモードの効果	2,100	20,200
インモードの料金	660	6,050
インモード施術	70	220
インモードリフティング	600	1,920

記事出所: セゲビズ、デイリーメド
データ出所: NAVER検索広告

国内で高い人気を誇る美容施術**「インモード」。
その**卓越した施術効果により、インモードを求める人々が着実に増加しています。**


なぜインモードなのか？

インモードは、RF高周波技術をベースとした施術で、大きく分けて2つの方式に分かれます。1. FX方式、2. FORMA方式(基本的な知識を提供)

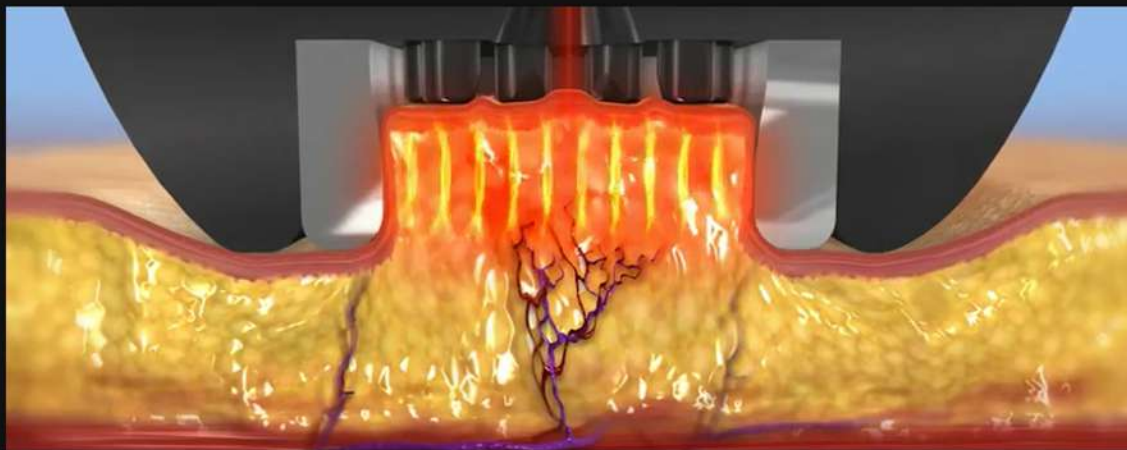

1. FX方式

- 皮膚の表面に熱を伝え、小じわの改善、肌のトーンやキメの改善に効果的
- 表皮と真皮層に熱を加え、コラーゲンとエラスチンの生成を活性化させ、肌の弾力を改善

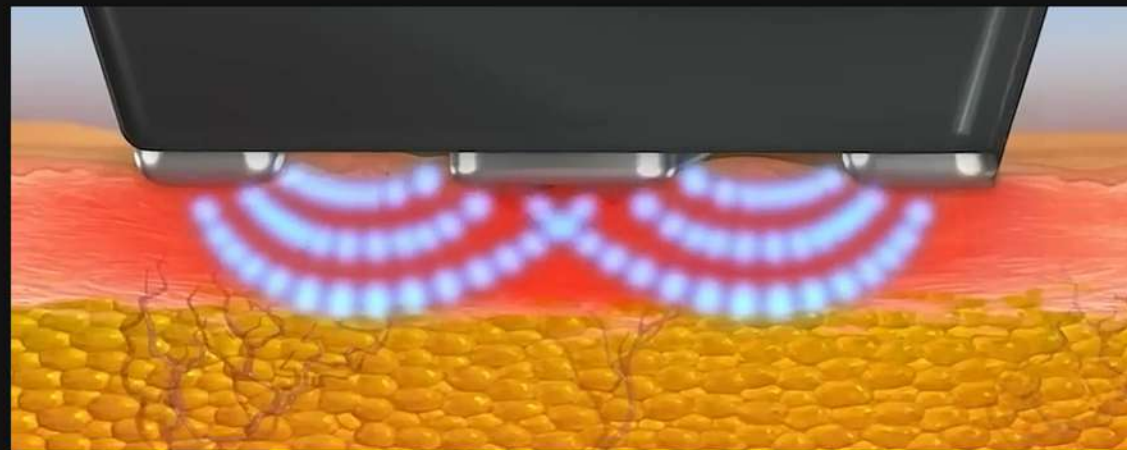

2. FORMA方式

- 皮膚の深層、特にSMAS層**まで高周波エネルギーを伝え、強力なリフティング効果をもたらします。
- 不要な脂肪細胞を破壊**し、脂肪層を減少させます。

Pinari miraclick

ピナリ ミラクリップ

確かな効果を誇る(ほこる)施術、「インモード」
この「インモード」の方式を、
自宅でも体験できる方法はないでしょうか？

⋮

という課題意識から開発された製品

この世になかった
新しい高周波リフティング

ミラクリップチップティング
(miraclick Chiputing)



数多くのインフルエンサーが実際に試して絶賛したリフティングデバイス

インフルエンサーによる実使用の絶賛! 目で見てわかるリフティング効果



わー、すごい！過去最高のリフティング効果**です！

私が使った美容機器**の中で、
最も効果が高いです！



つつい手伸びる～♪

本体が軽量で使い方が簡単なので、
かっぱえびせんのようにつつい手伸びます！



**発売と同時に完売！
GSホームショッピングでも完売しました！**

GS SHOP

放送でも証明された消費者の選択
発売と同時に2度の完売記録、さらにGSホームショッピングでも完売！

完売が証明するリフティングデバイス

この世に存在しなかった、新しい高周波リフティング
ピナリ ミラクリップ




区分	詳細説明
LED	RF / IR LED+レッドLED エレクトロポレーション（EP） / 微弱電流（MC）
主要機能	顔の部位別ラインケア / ハリの向上 / バランス改善 コラーゲン生成促進 / エラスチン生成促進
充電時間	4時間
推奨使用時間	フルフェイス 12分
連続使用時間	1時間
使用電源	5V / 2A
サイズ(W*D*H)	45mm x 194mm x 35mm (W x H x D)
発売日	2025年1月


*本ドキュメントには、Pinari の新製品情報が含まれており、無断での配布を禁じます**。

ピナリ ミラクリップの差別化ポイント

速くて正確に、高周波の近道！

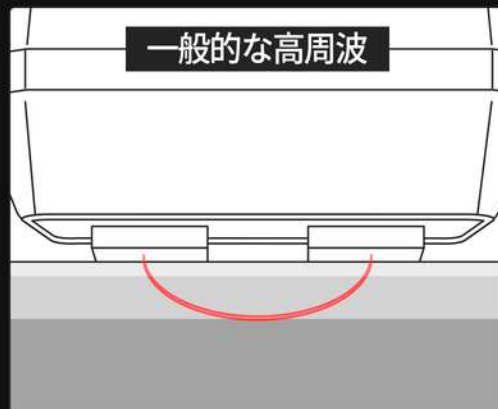


高周波の伝達経路が長いため、損失が多いです。

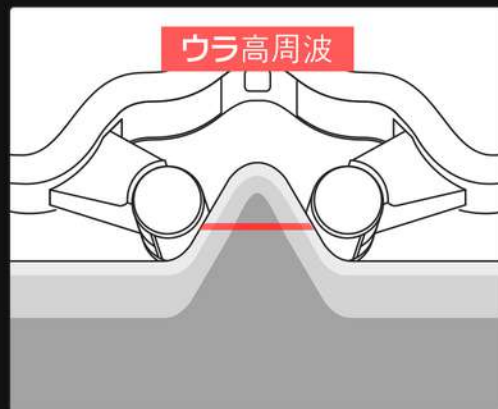


高周波の伝達経路が短いため、より効果的です。

効果の基準、高温高周波

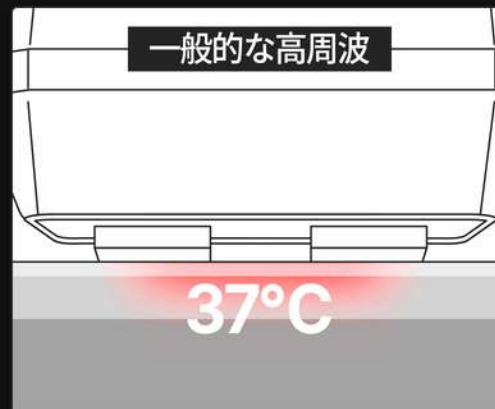

高周波エネルギーの分散、温度伝達の限界もあります。

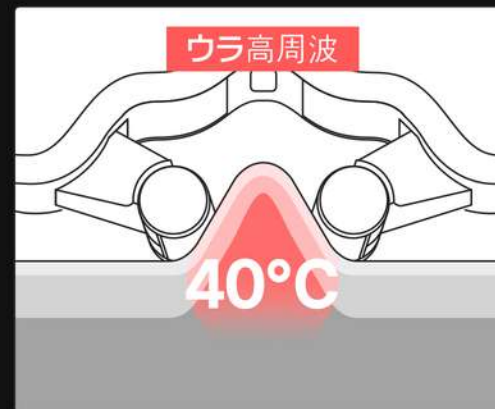

高周波エネルギーの集中、高温伝達

ピンポイントリフティング



高周波(こうしゅうは) + エレクトロポレーション + 微弱電流(びじゃくでんりゅう)
+ 近赤外線(きんせきがいせん) + レッド(RED)

ピンポイントリフティング

miraclip Grabテクノロジー



miraclip MODEとは？

肌の奥深くにエネルギーを効率的に届け、
肌のハリ改善と健康的なラインケアを
最大化する革新的なホームケアソリューションとして、
ピナリが独自に開発しました。



ピナリ ミラクリップの**核心技术**

miraclick MODE

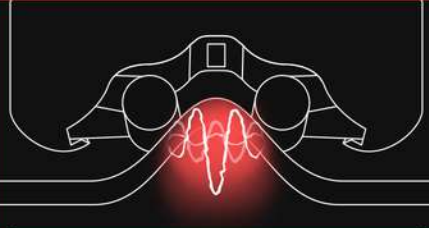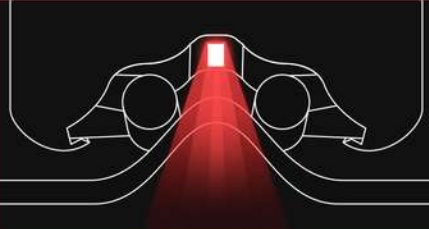-	技術	機能	効果
	ウラエフェクト	1MHz RF + エレクトロポレーション	- 肌の真皮層から皮下組織まで高温の熱を伝達 - 健康的なラインケア効果をサポート - 皮膚の内側からのハリ効果を助ける
	ウラケア	2MHz RF + 微弱電流(マイクロカレント)	- 肌の表皮層から真皮層まで高温の熱を伝達 - コラーゲンとエラスチンの生成促進 - 表面のハリ効果をサポート
	ウラライト	IR(近赤外線) + RED(レッド)	- IR 800nm + RED 600nm 帯の波長で表皮層から皮下組織まで近赤外線を届ける - 肌の健康効果をサポート

独自の**ピンポイントリフティング**技術を採用し、インモード施術の期待効果を自宅でも手軽に体験できるよう設計しました。


結果で証明された確かな効果

臨床実験テスト結果




押し跡の弾性
回復力の測定

49.4% 改善

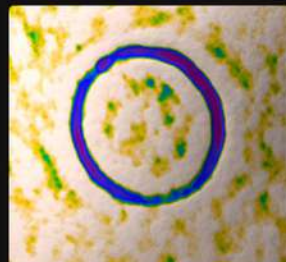


使用前

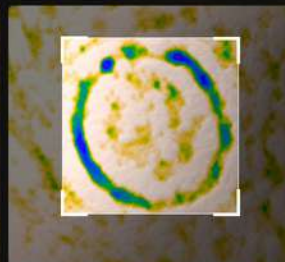


使用2週間後

肌の緻密度測定

26.2% 改善

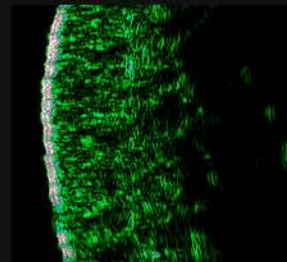


使用前

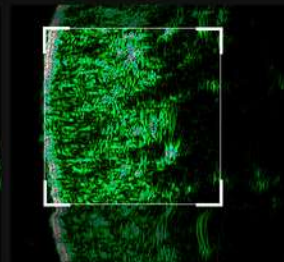


使用2週間後

額の肌の引き締め測定 **48.2%** 改善

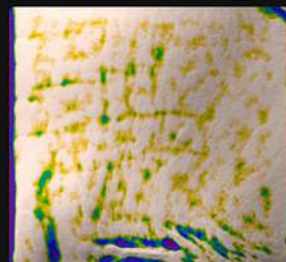


使用前

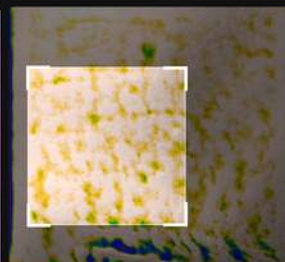


使用2週間後

頬の肌の引き締め測定 **32.3%** 改善

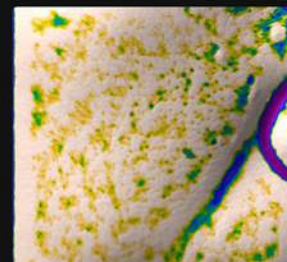

使用前

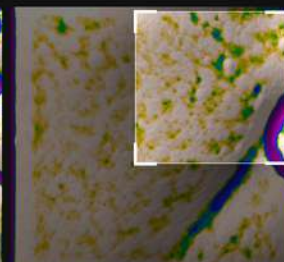


使用2週間後

結果で証明された確かな効果


臨床実験テスト結果

ほうれい線の肌の
引き締め測定

37.2% 改善

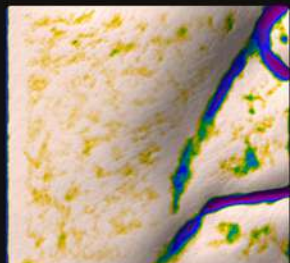


使用前

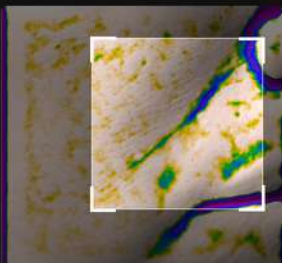


使用2週間後

口元の肌の
引き締め測定

39% 改善

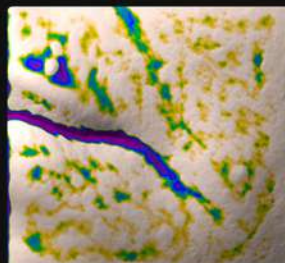


使用前

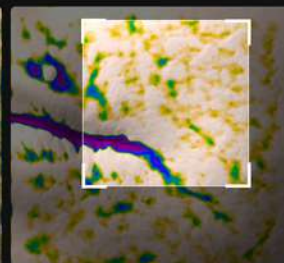


使用2週間後

毛穴の体積

36.9% 改善

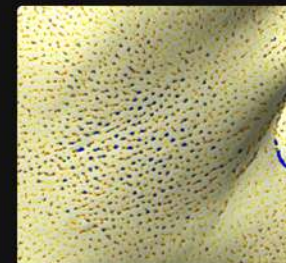

使用前

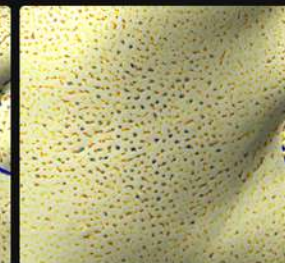


使用2週間後

たるみによる 顎の境界線部分の皮膚タイトニング測定


48.2% 改善




使用前

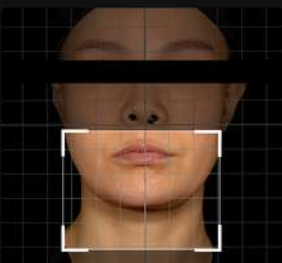

使用2週間後

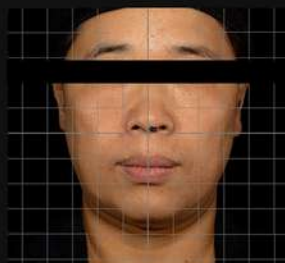


使用前

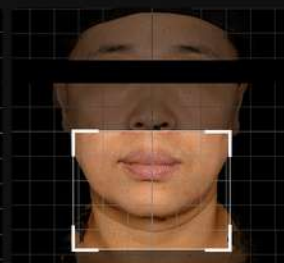

使用2週間後



使用前

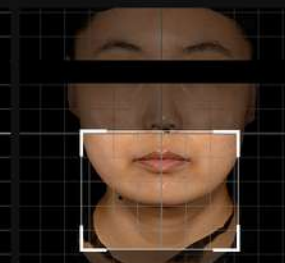

使用2週間後

特許出願で証明された革新



集中管理と制御技術に関する
2件の特許を出願中の
スキンケアデバイス。

信頼の技術力で、
肌の変化を実感いただけます。

A woman with dark hair pulled back, wearing a white halter-neck top and high-waisted white trousers, stands with her left hand on her hip. The background is a plain, light color.

THANK YOU.

Pinari